

IPL REJUUVENE

A mais nova e avançada tecnologia europeia agora disponível no Brasil



Certificação para uso Médico

CE

0197

O sistema IPL Rejuvene Medical emite pulsos de luz intensa para remoção de Manchas, Talangectasias, Epilação e Rejuvenescimento. O sistema utiliza o princípio de Fototermólise Seletiva. Possui os seguintes componentes:

- Sistema computacional;
- Interface de fácil manuseio: Touch Screen;
- 2 Hand Piece;
- Hand Piece com Resfriamento especial (Cooling System).

Fale com nosso representante



Rejuvene Medical

Representante Exclusivo
Rejuvene Medical
Rejuvenating what time takes away!
O seu distribuidor **AQUA life**

Princípios do tratamento

IPL (Luz Intensa Pulsada) baseada na física e teoria da fototermólise seletiva.

A luz é absorvida pela melanina nos folículos pilosos através do efeito óptico e térmico gerado a partir da fonte luminosa que atinge o pelo eliminando-o rápida e permanentemente.

O IPL produz um excepcional efeito de pigmentação, estimula a produção de colágeno e melhora o rearranjo das fibras elásticas proporcionando a remoção de pigmento da pele e rejuvenescimento.

Tratamento

- Remove ou inibe o crescimento do pelo indesejável em todas as partes do corpo.
- Corrige rugas.
- Melhora todos os tipos de lesões pigmentadas, por exemplo, manchas na pele, manchas de idade, manchas induzidas por sol
- Melhora o aspecto da pele
- Rejuvenesce, clareia e melhora a elasticidade da pele




Agência Nacional
de Vigilância Sanitária


Registro na ANVISA nº 80279420025

Rejuvenescimento

Antes

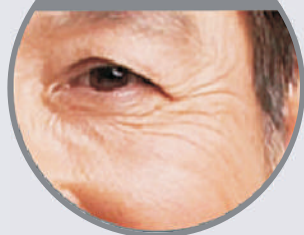

Depois

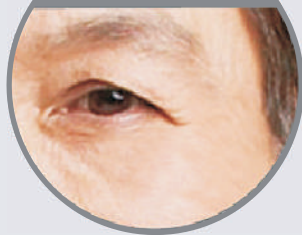


Talangectasias

Antes



Depois

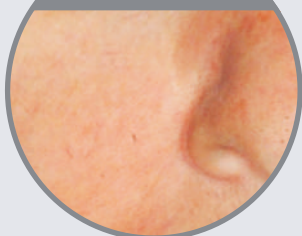

Remoção de Manchas

Antes



Depois



Remoção de Pelos

Antes



Depois



Pulso intenso de luz com comprimentos de onda

• SR- (Skin Rejuvenation) Rejuvenescimento, Manchas, Talangectasias	560nm-1200nm
• HR- (Hair Removal) Epilação	690nm-1200nm

Especificações Técnicas

Densidade de Energia (máxima)	50 J/cm ²
Dimensão do Spot	HR: 16 X 57mm (Gde), SR: 8 X 34mm (Peq)
Peso	35Kg
Tempo do pulso	HR 2,0 e SR 1,5 ms
Light Guide	Sistema de Cristal Óptico
Potência	600 W

Representante Exclusivo



Rejuvene Medical

Rejuvenating what time takes away!

Av. Prof. Alfonso Bovero, 1.057 - cj. 86 a 89
05019-011 - Sumaré - São Paulo/SP

Tel.: 11 3459-5559

Fax.: 11 3459-5539

www.rejuvenemedical.com.br

O seu distribuidor AQUA lift